

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 08- LIMPEZA DAS ESCOVAS- Página 1 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS ESCOVAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 30/06/2027

1. CONCEITO:	
1.1 Responsáveis pela execução Técnico de enfermagem/ Enfermeiro	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Evitar a proliferação de microrganismo nos materiais utilizados para limpeza dos endoscópios 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Realizar a limpeza e desinfecção do endoscópio

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> P/ Profissional: Luvas, máscara, óculos e avental P/ Limpeza: Detergente enzimático, água corrente, cubas P/ Desinfecção: Cuba com solução desinfetante P/ Enxague: Água corrente Recipiente para guarda dos materiais limpos

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
ATIVIDADES: <ul style="list-style-type: none"> Após final das atividades realizar a limpeza das escovas utilizados durante limpeza e desinfecção dos endoscópios; Com uso de EPI Imergir as escovas em detergente enzimático, obedecendo as instruções do fabricante para uso adequado da solução; Proceder a escovação das mesmas; Enxaguar em água corrente abundantemente; Secar externamente e escorrer ao máximo antes de colocar em solução desinfetante. Imergir totalmente as escovas na solução desinfetante; Cronometrar o tempo para imersão na solução, conforme indicação do fabricante do desinfetante; Após retirar e lavar em água corrente abundantemente; Secar com pano macio; Armazenar no recipiente com tampa; Deixar o setor limpo e organizado.


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 08- LIMPEZA DAS ESCOVAS- Página 2 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ESCOVAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão: 30/06/2027
		Versão: 02	

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Deve acontecer imediatamente a limpeza e desinfecção após o término do procedimento na sala, para evitar ressecamento de secreções.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

Imagem 01.

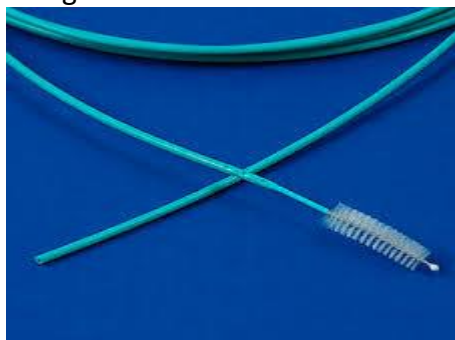

Google imagens



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 08- LIMPEZA DAS ESCOVAS- Página 3 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ESCOVAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão: 30/06/2027
		Versão: 02	

6. REFERÊNCIAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de limpeza e desinfecção de aparelhos endoscópicos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Endoscopia Gastrointestinal. SOBEEG, ANVISA, 2006. Disponível em: www.anvisa.gov.br/servicossaude/manuais/sobeeg_manual.pdf e www.sobeeg.com.br
2. RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre os produtos saneantes com ação antimicrobiana, harmonizados no âmbito do Mercosul por meio da resolução GMC nº 50/06. ANVISA. Brasília, Ministério da Saúde, 2007.
3. RDC nº 55, de 14 de novembro de 2012. Dispõe sobre os detergentes enzimáticos de uso restrito em estabelecimentos de assistência à saúde com indicação para limpeza de dispositivos médicos e dá outras providências. Brasília DF; Ministério da Saúde, 2012.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 08- LIMPEZA DAS ESCOVAS- Página 4 de 4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ESCOVAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	30/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/10/22	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
3	30/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/10/22
Versão 2 – Revisão Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF Validação Nayanne Ingrid F.M. Guerra CCIH/NSP COREN 489616-ENF Registro, análise e revisão final Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Aprovação Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 30/06/25