

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 034-Página 1 de 4	
Título do Documento	CONFEÇÃO DO PACOTE CONTROLE DESAFIO(PCD)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Confeção do pacote utilizado para os testes com indicador biológico e químico

1.1 Responsáveis pela execução

Enfermeiro e Técnico de enfermagem

1.2 Finalidades

- Controle do funcionamento da autoclave
- Garantia de esterilização eficaz
- Promover o maior desafio possível para o ciclo de esterilização certificando que as condições essenciais para a esterilização foram alcançadas pela avaliação do desempenho e eficácia do equipamento.

1.3 Indicações

- Orientar a equipe quanto a confeção dos pacotes teste desafio, caso não tenha o reutilizável na CME para uso.

2. MATERIAIS

- Roupa privativa;
- EPI do setor conforme POP nº08(EPI utilizado nos setores da CME)
- Embalagem Manta (SMS);
- Fita zebrada e hospitalar;
- Integradores químicos.
- Indicador biológico
- 16 campos de algodão limpos com as seguintes dimensões 23cm de comprimento x 23cm de largura x 15cm de altura;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade
3. Montar o pacote teste desafio dobrando os campos de algodão no comprimento em 1/3 na dimensão mais longa, conforme passo A mostrado na figura 1;
4. Dobrados ao meio por duas vezes, conforme passos B, C e D demonstrados na figura 1;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 034-Página 2 de 4	
Título do Documento	CONFEÇÃO DO PACOTE CONTROLE DESAFIO(PCD)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão: 01/06/2027
		Versão: 02	

5. Posicionar os campos um sobre o outro com as dobras uma ao oposto da outra (figura 2);
6. Posicionar uma unidade de Integrador Químico (IQ) ou Indicador Biológico (IB), conforme o tipo de teste a ser realizado, no centro da pilha de campos de algodão, entre o sétimo e oitavos campos;
7. Embalar o pacote com manta (SMS) e passar a fita hospitalar em volta do pacote e uma tira de fita zebreada;
8. Carregar a autoclave normalmente com materiais conforme POP nº 027;
9. Posicionar o pacote horizontalmente próximo ao dreno;
10. Fechar a autoclave e acionar o ciclo conforme tipo de carga;
11. Acompanhar e anotar os dados do ciclo conforme POP nº 019 e POP nº 020.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- A confecção do pacote teste desafio é embasada nas orientações da Associação Americana para o Avanço da Instrumentação Médica - ANSI/AAMI ST49:2006 and A1&A2.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

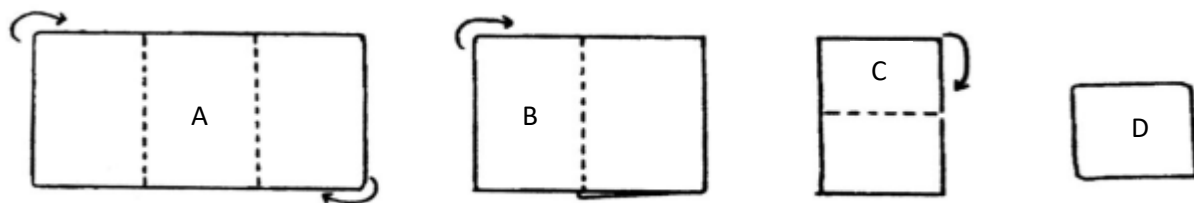


FIGURA 1

16 CAMPOS



FIGURA 2

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 034-Página 3 de 4	
Título do Documento	CONFECÇÃO DO PACOTE CONTROLE DESAFIO(PCD)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

6. REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília
2. GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas, 7 ed. São Paulo: SOBECC, 2017
4. EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.
5. FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.
6. POZZER, Carmem Eulália. Desinfecção térmica de produtos para saúde e sua prevenção em sistema de barreira. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, 2017.
7. Manual de Normas e Rotinas para o Processamento de Materiais de Enfermagem/Médico/Odontológico, 2014. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. [www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual Esterilização SMS Campinas versão final rev2015.pdf](http://www.saude.campinas.sp.gov.br/Manual%20Esterilizacao%20SMS%20Campinas%20versao%20final%20rev2015.pdf). Acesso em 12/07/2024.
8. SAUDE, Ministério. Manual de Processamento de Produtos para Saúde: Diretoria de Enfermagem. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/documents>. Acesso em 12/07/2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 034-Página 4 de 4	
Título do Documento	CONFEÇÃO DO PACOTE CONTROLE DESAFIO(PCD)	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/09/21	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN 74168-ENF	Data: 01/09/21
Versão 2 – Revisão Rogéria Araújo do Amaral Coordenadora da CME COREN-74168-ENF Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/06/25