

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 052-Página 1 de 5	
Título do Documento	PREPARO DOS PACOTES CIRURGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

1. CONCEITO: Ato de preparar os campos cirurgicos recebidos da lavanderia para esterilização	
1.1 Responsáveis pela execução Tecnico de enfermagem da área de preparo(setor limpo)	
1.2 Finalidades <ul style="list-style-type: none"> Garantir fluxo e técnicas no serviço de processamento de roupas. 	1.3 Indicações <ul style="list-style-type: none"> Orientar o colaborador a preparar os campos cirurgicos que serão utilizados nos procedimentos quando recebidos da lavanderia.

2. MATERIAIS
<ul style="list-style-type: none"> Roupa privativa Campos de tecido algodão Capotes de tecido algodão Embalagens de tecido algodão Embalagem grau cirurgico Fita hospitalar adesiva Fita zebrada Seladora Etiqueta de identificação

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
1. Lavar as mãos e friccionar álcool glicerinado a 70% antes e após as atividades;
2. Receber da lavanderia os enxovais limpos para o preparo dos campos cirurgicos diretamente na sala de preparo
3. Inspeccionar o capote/campo quanto seu perfeito estado de conservação, o mesmo deve estar sem sujidade, sem solução de continuidade (rasgos, perfurações e cerzidos), com seus amarrilhos (cadarços) e punhos íntegros;
4. Capote dobrar seguidos os passos (figura 1): <ol style="list-style-type: none"> Suspender no ar e abrir o capote, segurando - o pelas pontas superiores, com o lado direito para o lado de fora Ainda no ar, dobrá-lo, ao meio, no sentido longitudinal, de forma que a abertura fique voltada para o lado esquerdo Manter o capote no ar, introduzir a mão esquerda na cava (gola), fazendo a superposição dos ombros, e dobrar, novamente em sentido longitudinal

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 052-Página 2 de 5	
Título do Documento	PREPARO DOS PACOTES CIRURGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<p>4) Correr a mão direita pelo capote para segurá-lo pelas extremidades</p> <p>5) Colocar o capote estendido, sobre a mesa, tendo o decote voltado para o lado esquerdo e a abertura para o operador. Dobrá-lo novamente em sentido longitudinal</p> <p>6) Colocar a manga e os amarrilhos ao longo do capote</p> <p>7) Dobrar o capote ao meio, da direita para a esquerda</p> <p>8) Dobrar mais uma vez da esquerda para a direita, mantendo as aberturas sempre para o lado do executante</p> <p>9) Girar o capote de modo que as aberturas fiquem para o lado direito e dobrar, em diagonal, as extremidades superiores, com o cuidado de deixar o amarrilho do decote sob a dobra</p>			
<p>5. Campos cirurgicos dobrar seguidos os passos (figura 2):</p> <p>1) Realizar a dobra do quadrado, que consiste em: pegar um lençol simples, dobrar em quatro, ao final dobrar suas pontas, duas a duas, para dentro</p> <p>2) Realizar a dobra do lençol em leque, que consiste em: pegar um lençol simples, realizar a primeira dobra em leque no comprimento do lençol, deixando as aberturas do lençol para baixo, pega a abertura que ficou embaixo e passa para cima, realiza a segunda dobra em leque, fazendo pequenos quadrado ao longo do lençol</p>			
<p>6. Campo fenestrado dobrar seguindo os passos(figura 4):</p> <p>1) Suspender no ar e abrir o campo, segurando-o pelas pontas, com o lado direito para foraColocar o campo estendido sobre a mesa e correr as mãos sobre o campo para estica-lo</p> <p>2) Dobrar o campo ao meio, no sentido longitudinal, utilizando a fenestra como base, de forma que a fenestra forme uma meia lua. As pontas do campo fiquem voltada para baixo</p> <p>3) Dobrar novamente no sentido longitudinal mantendo a abertura do campo para cima</p> <p>4) Correr as mãos sobre o campo para estica-lo</p> <p>5) Dobrar o campo nas laterais, lado direito formando um pequeno leque, repete no lado Esquerdo</p> <p>6) Depois dobrar o campo ao meio de forma que as metades da meia lua da fenestra fique de cada lado do campo</p>			
<p>7. LAP cirurgico:</p> <p>1) Separar todos os campos que compõem um LAP Cirúrgico: 03 capotes, 05 campos longo e 01 lona grande para envolucro</p> <p>2) Proceder o empacotamento do capote conforme técnica de empacotamento(figura 3)</p> <p>3) Colocar fita crepe para lacrar o pacote, nela ou em etiqueta padronizada, devem ser colocadas as identificações do material de forma visível e legível, deve conter nome do produto, número do lote, data da esterilização, data limite de uso, número de peças,método de esterilização e nome do responsável pelo preparo</p> <p>4) Em cada pacote da algodão, na parte da frente, logo abaixo da fita crepe, deve-se colocar um pedaço de fita classe I (fita zebreada), no tamanho de 5 cm de comprimento</p>			
<p>8. Pacote dos setores(CTI, Hemodiálise, urgência, Dr George):</p> <p>1) Separar todos os campos que compõem um LAP Cirúrgico: 01 capote, 01 campo fenestrado longo e 01 lona grande para envolucro</p> <p>2) Proceder o empacotamento do capote conforme técnica de empacotamento(figura 3)</p>			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 052-Página 3 de 5	
Título do Documento	PREPARO DOS PACOTES CIRURGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

3) Colocar fita crepe para lacrar o pacote, nela ou em etiqueta padronizada, devem ser colocadas as identificações do material de forma visível e legível, deve conter nome do produto, setor, número do lote, data da esterilização, data limite de uso, número de peças, método de esterilização e nome do responsável pelo preparo
4) Em cada pacote de algodão, na parte da frente, logo abaixo da fita crepe, deve-se colocar um pedaço de fita classe I (fita zebrada), no tamanho de 5 cm de comprimento
9. Os fenestrados pequenos e capotes avulsos realizar o empacotamento utilizando embalagem grau cirurgico e identificar com etiqueta padronizada
10. Emcaminha os pacotes cirurgicos(LAP), pacotes setores, fenestrados pequenos e capotes avulsos para esterilização
11. Manter local limpo e organizado

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Assegurar a correta dobradura afim de evitar que o cirurgião contamine durante a vestimenta
- Preparar o capote cirúrgico devidamente identificado para uma esterilização segura.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



FIGURA 1

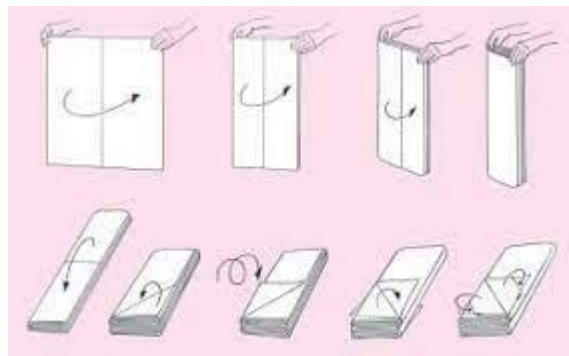


FIGURA 2

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 052-Página 4 de 5	
Título do Documento	PREPARO DOS PACOTES CIRURGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

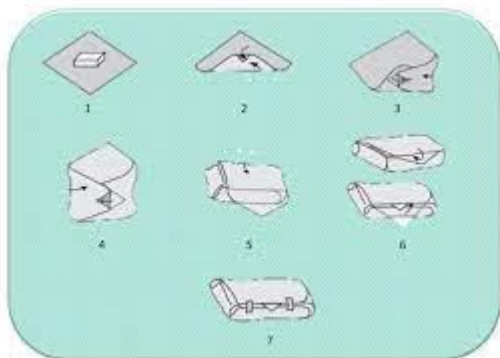


FIGURA 3

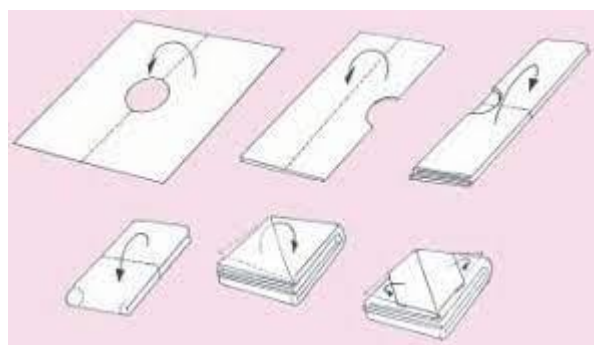


FIGURA 4

6. REFERÊNCIAS

- BRASIL. ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGLÂNCIA SANITÁRIA. Processamento de roupas de serviços de saúde: prevenção e controle de riscos. Brasília, 2007. 120p.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.120p.
- Caderno EBSERH de Hotelaria Hospitalar Volume I–Produzido pelo Serviço de Apoio à Hotelaria Hospitalar–Brasília:EBSERH–Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2ª EDIÇÃO – 2018(Revisada e ampliada) 36p.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	14/07/23	Elaboração inicial do documento
2	01/08/24	Alteração na formatação do documento
2	01/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração

Rogéria Araújo do Amaral
Coordenadora da CME
COREN 74168-ENF

Data: 14/07/23



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP CME- 052-Página 5 de 5	
Título do Documento	PREPARO DOS PACOTES CIRURGICOS	Emissão: 01/06/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	01/06/2027

<p>Versão 2 – Revisão</p> <p>Validação Sônia da Silva Delgado Divisão Assistencial</p> <p>Registro, análise e revisão final Nayanne Ingrid F.M. Guerra NASP-COREN 489616-ENF</p> <p>Ana Carolina Gomes de Farias CCIH- COREN 564584-ENF</p> <p>Aprovação Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF</p>	Data: 01/06/25
---	----------------